



Rightest® GETTING STARTED GUIDE (For self-testing)

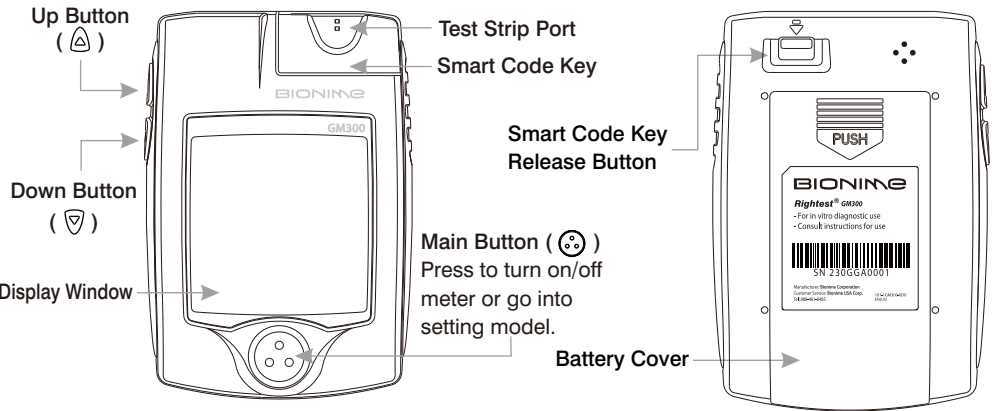


Front View of Meter

Back View of Meter

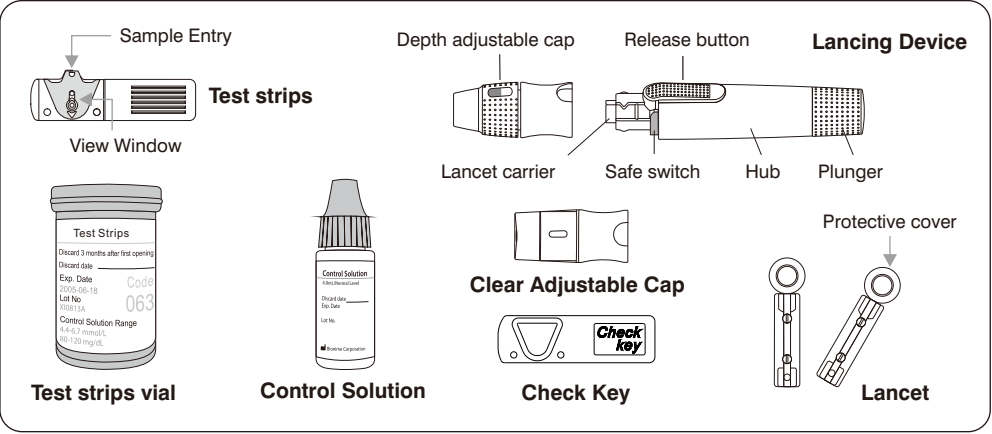


1 Batteries Installation

Turn the meter over. Press and push battery cover to open. Install both batteries at once. Be sure to put battery in correct direction.

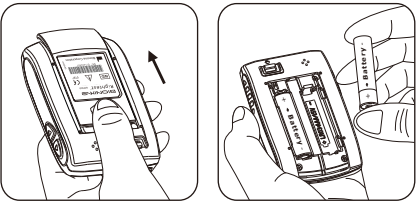

2 Smart Code Key Installation

- 1) With the Meter off, follow ① and ② direction to put the new Smart Code Key into the track on code key base.
- 2) Push down the Smart Code Key until it snaps into the Smart Code Key base.

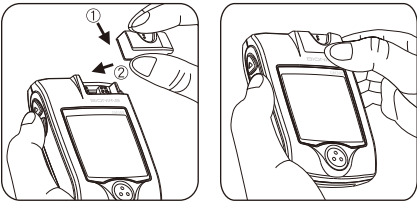


3 Setting Up Your Meter - Setting the Date, Time and Unit

- 1) Press and release main button "⊕" to turn on the Meter.
- 2) Press and hold main button "⊕" for five seconds until you go into the setting mode. Before you go into setting mode, you will see power off first. Please keep pressing it until you go into the setting mode. The year will flash.
- 3) Press up button "▲" or down button "▼" to change the year.
- 4) Press main button "⊕" to confirm the year and move to month setting.




- 5) Repeat steps 3 and 4 to change the date, time format, hour, and minute. After pressing the main button to confirm the minute unit, your set-up has been finished.

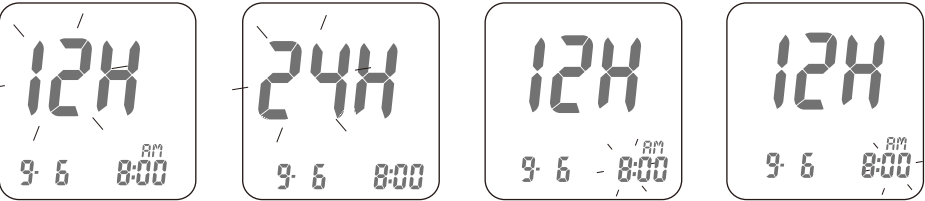


4 Preparing the Lancing Device

- 1) Pull off the depth adjustable cap.
- 2) Insert a new disposable lancet firmly into lancet carrier.
- 3) Twist off and set aside the protective cover of the disposable lancet.

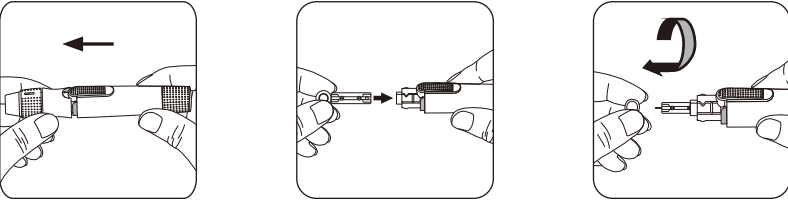


- 4) Replace the depth adjustable cap
- 5) Choose a depth of penetration by rotating the top portion of the depth adjustable cap until the setting depth matches the window. Settings are based on skin type: "□" for soft or thin skin; "▤" for average skin; "▥" for thick or calloused skin.
- 6) Hold the hub in one hand and pull on the plunger in the other hand. The device will be cocked. Release the plunger, it will automatically move back to its original position near the hub.

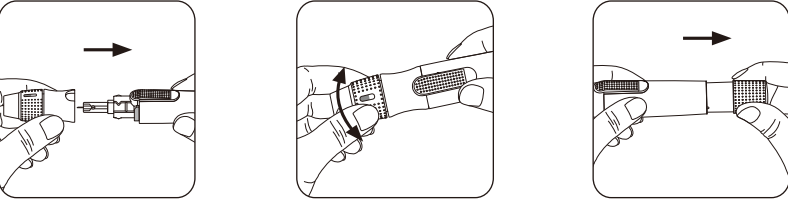


5 Performing a Test


- 1) Wash and dry your hands. Take one strip from the vial. Close the vial cap immediately.
- 2) Insert the strip into the strip port on meter with the indication symbol facing up. Push the strip in until it snaps and stops. The meter will turn on automatically.

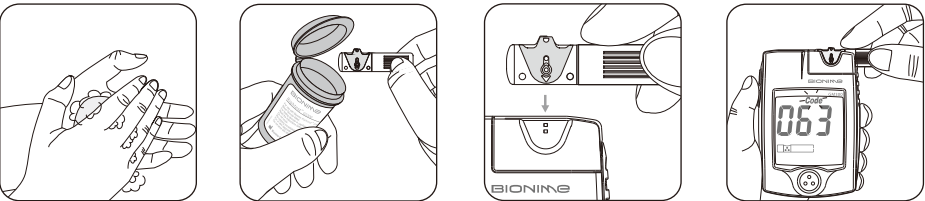

- 3) Make sure the code number on the meter screen matches the code number on the test strip vial.
- 4) When you see the flashing blood drop, hold the lancing device to side of your fingertip and press the release button.

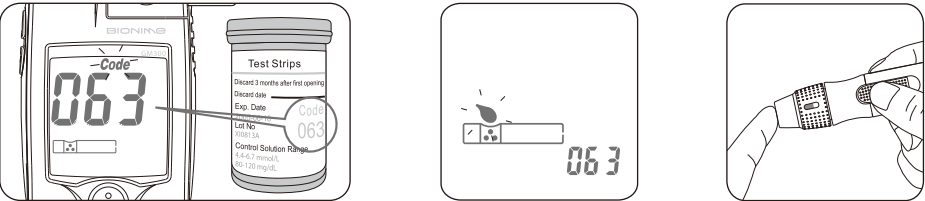

- 5) Gently squeeze your fingertip to get a drop of blood. Our meter only needs a tiny blood sample.

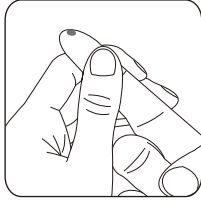


Sample Size Example




We suggest you to take 1.4~2.5µL to do the test on glucose monitoring system. Blood sample size above 4.0µL is too much which will contaminate the Smart Code Key.

Palm or forearm for alternative site test

1. Choose **clear cap** and follow step1 to step 5.
2. Massage the puncture area of palm or forearm for a few seconds.
3. Immediately after massaging the puncture area, press and hold the lancing device with the clear cap against palm or forearm.
4. Then press the release button.
5. Continue holding the lancing device against palm or forearm and gradually increase pressure for a few seconds until the blood sample size is sufficient.
6. Follow step 8~10 to discard the used disposable lancet.

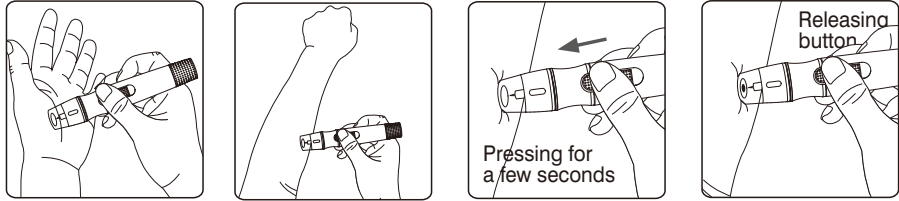


- 6) Touch and hold the drop to the edge of sample entry until you hear a " beep " and the view window is totally filled with blood. If the view window is not totally filled with blood or the test does not start. Then discard the test strip and repeat the test with a new test strip.
- 7) You will see the countdown mode on the screen. After 8 seconds, the test result appears. For more information about your test results, please see your User Manual.
- 8) Pull off the depth adjustable cap. Without touching the used disposable lancet, stick the lancet tip into the protective cover.9) Hold the release button in one hand and pull on the plunger in the other hand will safely eject the used disposable lancet.
- 9) Discard the used disposable lancet into an appropriate puncture-proof or biohazard container.
- 10) Replace the depth adjustable cap after finishing the test.

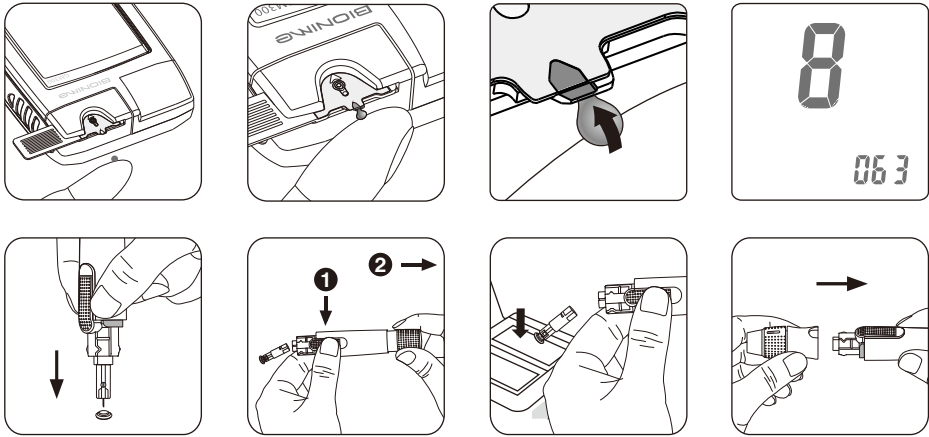


For more information on how to use your meter and understand your test results, please see the User Manual.

Guía de inicio de **Rightest®** (para auto-análisis)

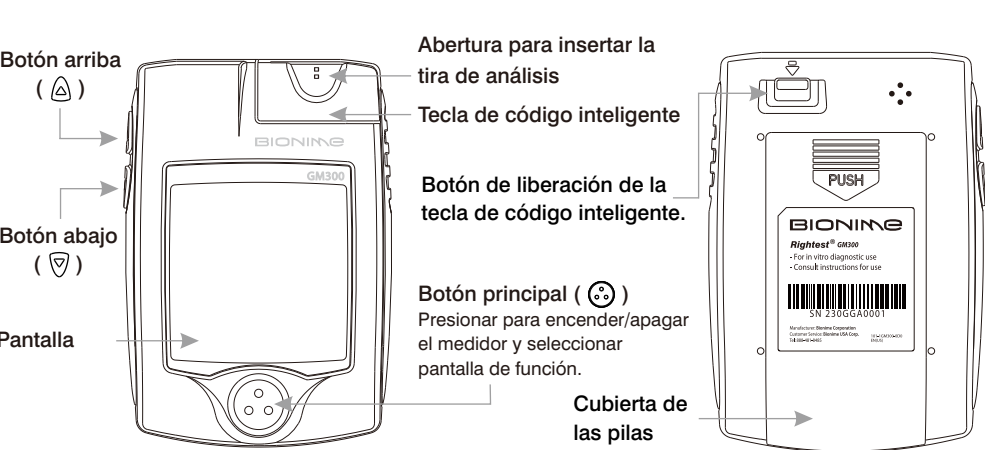


Vista frontal del medidor

Vista trasera del medidor

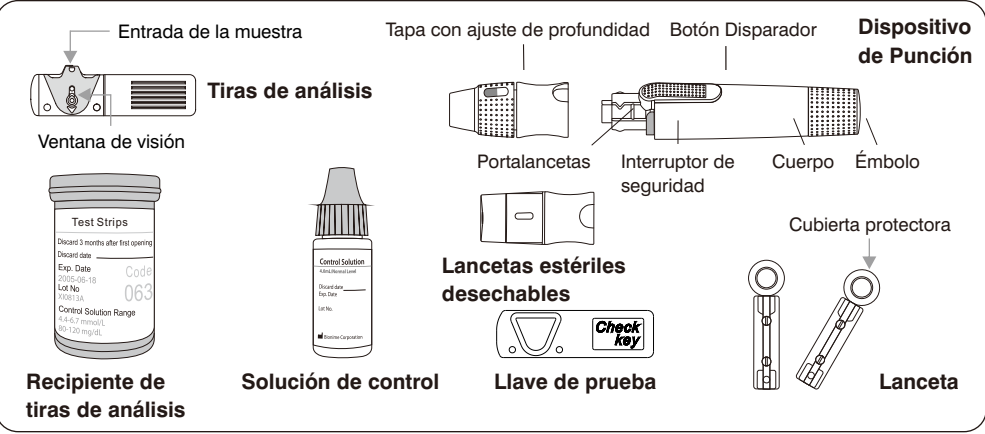


1 Instalación de las pilas

Gire el medidor, presione y empuje la cubierta de las pilas para abrirla. Instale ambas pilas a la vez. Asegúrese de poner las pilas en la dirección correcta.

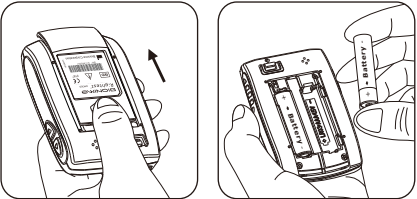

2 Instalación de la tecla de código inteligente

- 1) Con el medidor apagado, siga las direcciones 1 y 2 (ver figura) para introducir la tecla de código inteligente en el medidor.
- 2) Empuje hacia abajo y hacia atrás la tecla de código Inteligente dentro del medidor hasta que escuche “click”.

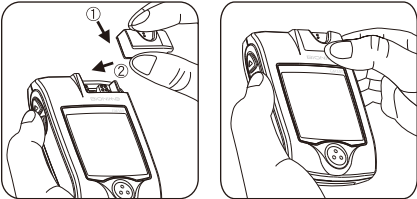


3 Ajustando la hora, la fecha y la unidad

- 1) Presione y suelte el botón principal "⊕" para encender el medidor.
- 2) Mantenga presionado el botón principal "⊕" durante cinco segundos hasta que se active el modo de ajuste. El medidor se apaga unos segundos antes de entrar en modo de ajuste. Continúe presionando hasta que entre en modo de ajuste y vea el año parpadeando.
- 3) Presione el botón "▲" o el botón "▼" para cambiar el año.
- 4) Presione el botón principal "⊕" para confirmar el año y pasar a configurar el mes.




- 5) Repita los pasos 3 y 4 para cambiar la fecha, el formato de tiempo, la hora, y los minutos. Después de presionar el botón principal para confirmar la unidad de medida, su configuración ha terminado.

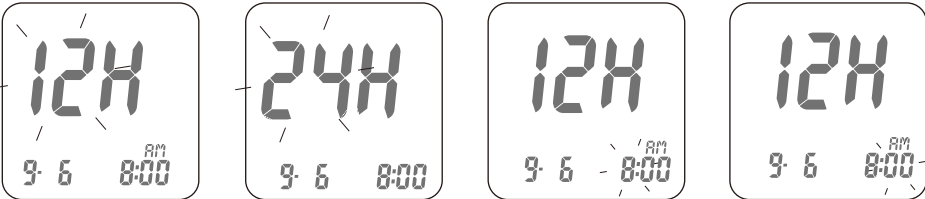

4 Preparación del dispositivo de punción


- 1) Extraiga la tapa con ajuste de profundidad.
- 2) Inserte una nueva lanceta desechable firmemente en el portallancetas.
- 3) Gire y extraiga la cubierta protectora de la lanceta desechable.

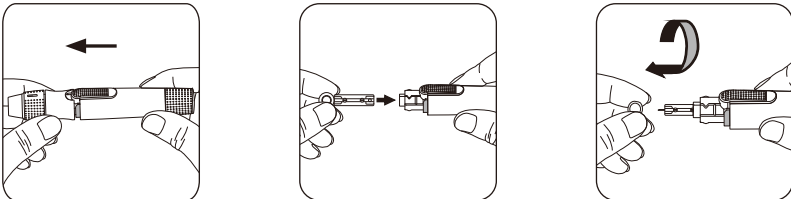

- 4) Vuelva a colocar la tapa con ajuste de profundidad.


- 5) Seleccione una profundidad de penetración girando la porción superior de la tapa con ajuste de profundidad hasta que la profundidad deseada coincida con la que aparece en la pequeña ventana. La configuración está basada en el tipo de piel.
" " corresponde a la piel suave y fina; " " corresponde a la piel promedio; " " corresponde a la piel gruesa o callosa.

- 6) Sostenga el cuerpo del dispositivo con una mano y apriete el émbolo con la otra. El dispositivo quedará preparado.

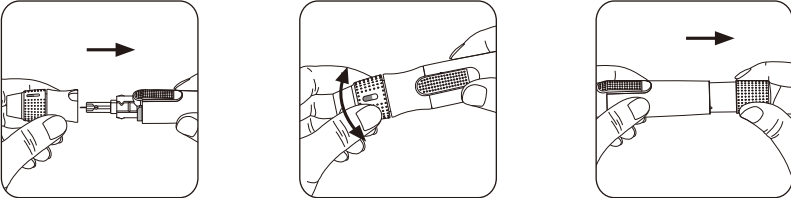


5 Realizar un análisis


- 1) Lave y seque sus manos. Tome una tira del recipiente. Cierre la tapa del recipiente inmediatamente.
- 2) Inserte la tira dentro de la ranura para las tiras en el medidor con la flecha hacia abajo. Empuje la tira hacia adentro hasta que se escuche "click". El medidor se enciende automáticamente.

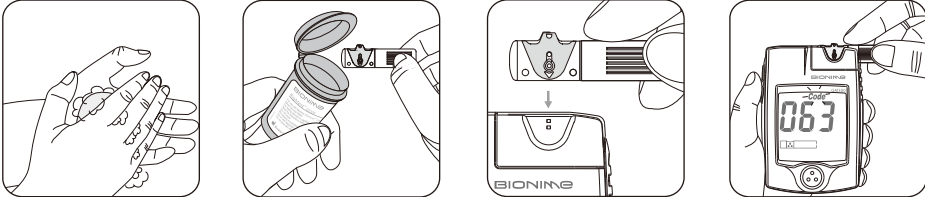

- 3) Asegúrese de que el número de código en la pantalla del medidor coincida con el número de código del recipiente de las tiras de análisis.
- 4) Cuando vea el símbolo de la gota de sangre parpadeando, mantenga el dispositivo de punción pegado a la yema de su dedo y pulse el botón de activación.

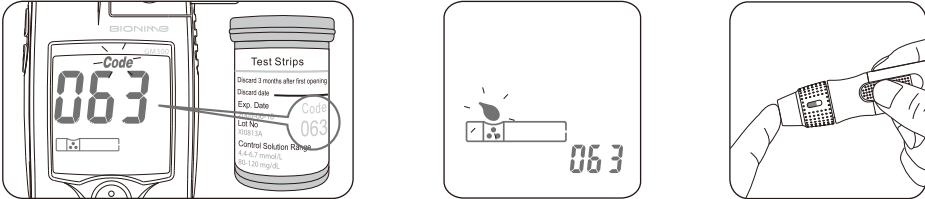

- 5) Apriete suavemente la punta de su dedo para obtener una gota de sangre. Nuestro medidor necesita solo una muestra pequeña de sangre. Le sugerimos que obtenga un tamaño de muestra de sangre alrededor de 1.4-2.5µl para analizarla.

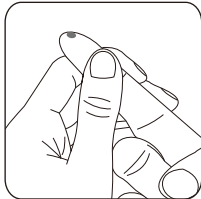


Ejemplo del tamaño de la muestra




Le sugerimos que tome 1.4-2.5µL para realizar el análisis del sistema de control de glucosa. Un tamaño de la muestra de sangre por encima de 4.0ul es demasiado y contaminara la tecla de código inteligente.

Palma o antebrazo como lugar alternativo para la realización de las pruebas

1. Seleccione una tapa limpia y siga los pasos 1 a 5.
2. Realice masajes en el área de punción de la palma o antebrazo durante algunos segundos.
3. Inmediatamente luego de masajear el área de punción, mantenga presionado el dispositivo de punción con una tapa limpia sobre la palma o antebrazo.
4. Luego, presione el botón disparador.
5. Continúe sosteniendo el dispositivo de punción sobre la palma o antebrazo e incremente gradualmente la presión durante algunos segundos hasta que el tamaño de la muestra de sangre sea suficiente.
6. Siga los pasos 8~10 para desechar la lanceta desechable usada

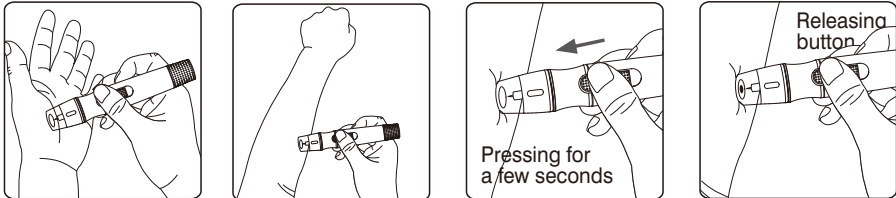

- 6) Ponga la yema del dedo con la gota con el borde de la entrada de muestras de la tira y manténgala hasta que escuche la alarma y la ventana de visión de la tira esté totalmente llena de sangre. Si la ventana de visión de la tira no se llena totalmente de sangre o la prueba no comienza, deseche la tira de análisis y repita la prueba con una tira de análisis nueva.
- 7) La pantalla mostrará una cuenta regresiva. Después de 8 segundos aparecerá el resultado del análisis. Para más información sobre los resultados de sus análisis, vea el manual del usuario.
- 8) Extraiga la tapa con ajuste de profundidad. Sin tocar la lanceta desechable usada, inserte la punta de la lanceta en la cubierta protectora.
- 9) Sostenga el botón disparador con una mano y apriete el émbolo con la otra para expulsar la lanceta desechable usada.
- 10) Deseche la lanceta desechable usada en un recipiente adecuado resistente a pinchazos o diseñado para elementos biopeligrosos.
- 11) Vuelva a colocar la tapa con ajuste de profundidad luego de finalizar la prueba.

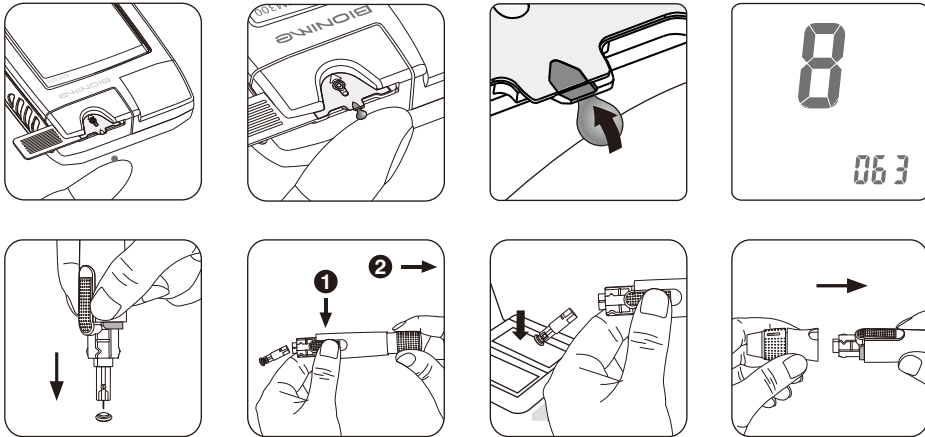

Para más información sobre cómo usar su medidor y entender los resultados de su análisis, por favor, vea el Manual de usuario.

BIONIME

Manufacturer:
BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
E-mail: info@bionime.com
http://www.bionime.com

USA Service Center:
BIONIME USA CORPORATION
1450 E. Spruce Street, Bldg. #B,
Ontario, CA 91761
Tel: +1 888 481-8485
Fax: +1 909 781-6970